


ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੌਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

Emergency Disconnect Procedure

ਮਾਡਲ ਏ.ਕੇ. 98
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਕੈਥੇਟਰ

1

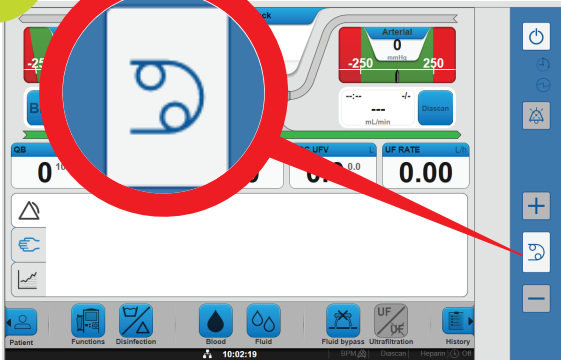


ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ
ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਟਨ
ਟਿਮਟਿਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2




ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਿੱਟ ਵਿਚਲੇ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ...

3

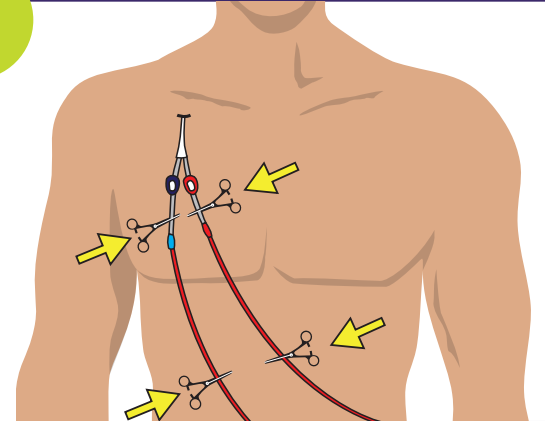

ਕੈਥੇਟਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ
ਕਲੈੱਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ
ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੈੱਪ ਲਗਾ ਦਿਓ।

4

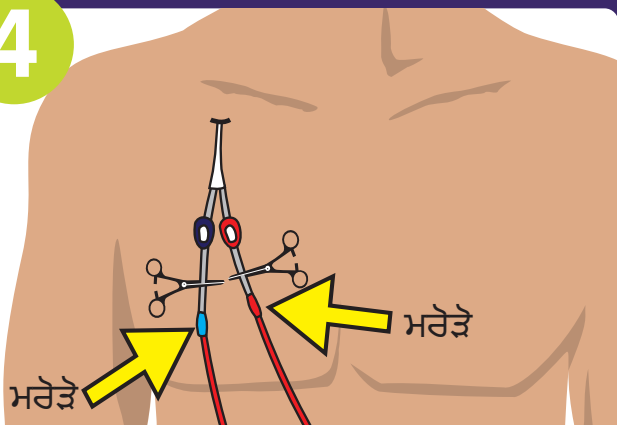

ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ
ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹੋ

5



ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

