


緊急斷離程序 Emergency Disconnect Procedure

NxSTAGE
供病人使用
人工血管或瘻管

1

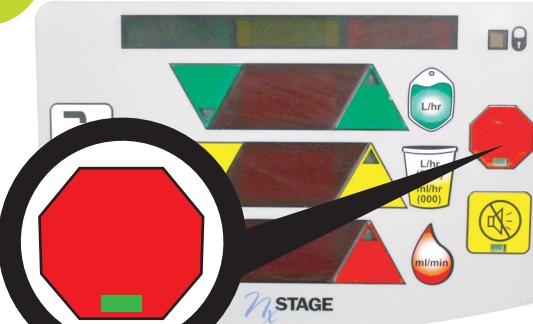


按血泵的按鈕
血泵將停動，小長方格將轉成
全綠色。

2




使用在急救袋中
找到的用品...

3

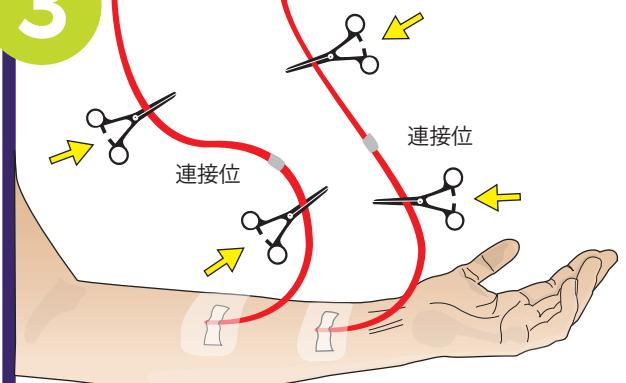

關好針頭和血路管上的兩個夾子。
在連接位下方和上方加放安全夾。

4

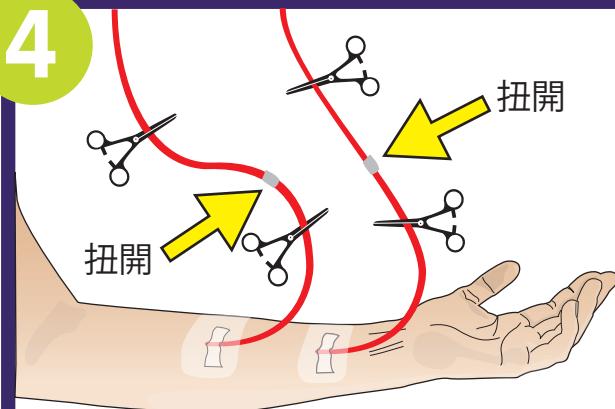

扭開連接位，
將血路管斷離。

5



攜同急救袋
前往安全的地方

Produced by



Better health. Best in health care.



更新日期：2023年4月